

Scan for more information



Check out our learning platform Reliance U! www.RelianceU.tech



Reliance Orthodontic Products, Inc.
1540 W. Thorndale Avenue,
Itasca, IL 60143 USA
1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com




EMERGO EUROPE
Prinssgracht 20, 2514 AP The Hague,
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR
EMERGO AUSTRALIA
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St,
Sydney, NSW 2000, Australia



GOTO® FLORESCING LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE

INSTRUCTIONS FOR USE

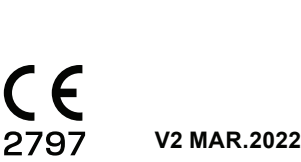

RelianceOrthodontics.com

EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: GoTo® is intended for use as a light cure bracket adhesive.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Tooth Preparation: Prophyl the enamel surfaces with 1st & Final®, rinse and dry thoroughly.

Etching: Apply etching agent onto the entire area to be bonded. Allow 30 seconds for etching. Rinse and dry thoroughly.

Primer Application: Apply 1 coat of Assure Plus and dry with air.

Application of Paste to bracket: Apply adhesive to bracket pad and smear into the bracket mesh. Apply bracket to the primed tooth surface. Light cure adhesive at close proximity for 10 seconds*. Note: GoTo will fluoresce under the presence of a blacklight

Bracket and Adhesive Removal:

To remove GoTo™ use a ligature cutter to grab the adhesive at the bracket/enamel interface and pinch the bracket from the tooth. Remaining material can be removed with a Renew® Finishing System Bur and Renew® Finishing System #383 Point.

⚠ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. If accidentally instilled into eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes. Avoid placement of etching agent on soft tissue.

⚠ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

⚠^{EN} **TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15-30 Degrees C.)

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

TO REORDER: #GTP, #GTT

BG - BULGARIAN

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: GoTo® е предназначен за използване като адхезив за леко втвърдяване на скоби.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Подготовка на зъбите: Почистете емайловите повърхности с 1st & Final®, изплакнете и подсушете добре.

Ецване: Нанесете вещество за ецване върху цялата област, която ще бъде свързана. Оставете 30 секунди за ецване. Изплакнете и подсушете добре.

Нанасяне на grund: Нанесете 1 слой от Assure Plus и подсушете с въздух.

Нанасяне на паста върху скобата: Нанесете лепило върху подложката на скобата и намажете и мрежата на скобата. Сложете скобата върху grundираната повърхност на зъба. Лепило за леко втвърдяване в непосредствена близост за 10 секунди*. Забележка: GoTo ще флуоресцира при наличие на черна светлина.

Махане на скобата и лепилото:

За да премахнете GoTo™, използвайте резец за лигура, за да хванете лепилото в интерфейса на скобата/емайла и да открате скобата от зъба. Останалият материал може да се отстрани с Renew® Finishing System Bur и Renew® Finishing System # 383 Point.

⚠ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата

измийте обилно със сапун и вода. При случайно попадане в очите промийте обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода в продължение на няколко минути. Избягвайте нанасянето на вещество за ецване върху меки тъкани.

⚠ Използването на UV, халогенна и LED светлина за втвърдяване може да е свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за втвърдяване със светлина.

⚠^{EN} **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15–30°С.)

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последващи, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предначинана употреба. Потребителят поема цялия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентите институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живееят.

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: GoTo® je určeno k použití jako světlem polymerované adhezivum na zámký.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava zubu: Profylaktčné ošetríte povrchu sklovinu pomocí 1st & Final®, opláchněte je a důkladně osušte.

Leptání: Leptadlo naneste na celou plochu, která má být bondována. Nechejte leptat 30 sekund. Opláchněte a důkladně osušte.

Nanesení primeru: Naneste 1 vrstvu Assure Plus a osušte vzduchem.

Nanesení pasty na zámký: Naneste adhezivní materiál na podložku zámků a vetřete jej do síťoviny zámků. Nasadte zámeK na povrch zubu ošetřeny primerem. Lehce vytvrzujte adhezivum z těsné blízkosti po dobu 10 sekund*. Poznámka: GoTo bude fluoreskovat za přítomnosti ultrafialového světla

Odstanění zámků a adhezivního materiálu: Chcete-li odstranit GoTo™, použijte frézu na ligaturu k uchopení adheziva na rozhraní zámeK/sklovina a sevřením vytváhněte zámeK ze zubu. Zbyvajcí materiál je možno odstranit pomocí vrtáčku dokončovacího systému Renew® a hrotem č. 383 dokončovacího systému Renew®.

⚠ **OPATŘENÍ:** Nepolymerizované pryskyřice mohou u vnímavých osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omyjte mydlem a vodou. Při náhodném vniknutí do očí vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhleďte lékařskou pomoc. Kontakt s ostatními tkaněmi: plochu zasaženou rozlitím okamžitě oplachujte velkým množstvím vody několik minut. Nepoužívejte leptací prostředek na měkkou tkáň.

⚠ Použití UV, halogenových a LED polymeračních světel může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymeračních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navržené ochranné brýle.

⚠^{EN} **OMEZENÍ TEPLOTY:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–30°C).

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno.

Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel

přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/ nebo pacient sídlí, jakoukoli závažnou událost.

DA - DANISH

INDIKATIONER GoTo® er beregnet som bindemiddel ved lyszærdning af brackets.

BRUGSANVISNING:

Tandpræparation: Rens emaljeoverfladerne med 1st & Final®, skyl og tør omhyggeligt.

Ætning: Påfør ætsemiddel på hele det område, der skal bondes. Lad det sidde 30 sekunder til ætning. Skyl, og tør omhyggeligt.

Primer-anvendelse: Påfør 1 lag Assure Plus og tør med luft.

Påføring af pasta på bracket: Påfør bindemiddel på bracketpuden og smør på bracketnettet. Påfør bracket på den primede tandoverflade. Lyszærdende bindemiddel i umiddelbar nærhed i 10 sekunder*. Bemærk: GoTo vil fluoresere ved UV-A-lys

Fjernelse af bracket og bindemiddel:

For at fjerne GoTo™ skal der bruges en ligaturskærer til at fange bindemidlet ved grænsefladen mellem bracket og emalje, og fjerne bracket fra tanden. Resterende materiale kan fjernes med et Renew® Finishing System Bur og Renew® Finishing System # 383 Point.

⚠ **FORHOLDSREGLER:** Uopolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis der ved et uheld kommer noget i øjet, skal der skylles med rigelig mængde vand og straks søges læge. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter. Undgå at komme ætsemiddel på blødt væv.

⚠ Brug af UV-, halogen- og LED-hærdelamper kan forbindes med øjenskader. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyszærdende enheder.

⚠^{EN} **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15-30 grader C.)

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig inet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Federal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg eller ordre fra en tandlæge.

BEMÆRK: Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

DE - GERMAN

ANWENDUNGSHINWEISE: GoTo® ist zur Verwendung als lichthärtender Bracketkleber vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Präparation der Zähne: Reinigung der Schmelzoberflächen mit 1st & Final®, danach gründliche Spülung und Trocknung.

Ätzung: Das Ätzmittel auf die gesamte zu verklebende Fläche auftragen. Für die Ätzung 30 Sekunden verstreichen lassen. Gründliche Spülung und Trocknung.

Auftragen des Primers: 1 Schicht Assure Plus auftragen und mit Luft verblasen.

Auftragen von Paste auf das Bracket: Kleber auf das Bracket-Pad auftragen und in das Bracket-Netz schmieren. Das Bracket auf der präparierten Zahnoberfläche anbringen. Den

Kleber in unmittelbarer Nähe 10 Sekunden lang mit Licht aushärten*. Hinweis: GoTo fluoresziert bei Vorhandensein von Schwarzlicht

Entfernen von Bracket und Kleber:

Zum Entfernen von GoTo™ einen Ligaturschneider verwenden, um den Kleber an der Schnittfläche von Bracket und Zahnschmelz zu fassen und das Bracket vom Zahn abzuheben. Verbleibendes Material kann mit einem Renew® Beschichtungssystem-Bohrer und einem Renew® Beschichtungssystem-#383-Punkt entfernt werden.

⚠ **VORSICHTSMASSNAHMEN:** Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Das Auge bei versehentlichem Einträufeln mit reichlich Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Die Platzierung des Ätzmittels auf Weichgewebe vermeiden.

⚠ Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-Härtungslampen kann mit Augenschäden einhergehen. Der Patient, der Arzt und die Assistentkraft sollten bei Verwendung dieser Lichthärtungsgeräte eine ordnungsgemäß ausgelegte Schutzbrille tragen.

⚠^{EN} **TEMPERATURBEGRENZUNG:** Bei Raumtemperatur lagern (15-30 Grad C.)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

EL - GREEK

ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το GoTo® προορίζεται για χρήση ως φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό αγκυλίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Παρασκευή δοντιού: Προφυλάξτε τις αδամαντίες επιφάνειες με το 1st & Final®, ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

Αδρωποίηση: Εφαρμόστε το αδρωποητικό μέσο επάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί. Αφήστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα για την αδρωποίηση. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

Εφαρμογή ενεργοποίηση: Εφαρμόστε 1 στρώση Assure Plus και στεγνώστε με αέρα.

Εφαρμογή της πάστας στο αγκύλιο: Εφαρμόστε συγκολλητικό στη βάση του αγκυλίου και επαλείψτε εντός του πλεγματος του αγκυλίου. Τοποθετήστε το αγκύλιο στην προετοιμασμένη επιφάνεια του δοντιού. Φωτοπολυμερίστε το συγκολλητικό από κοντινή απόσταση για 10 δευτερόλεπτα.* Σημείωση: Το GoTo θα φθορίζεi κάτω από blacklight.

Αφαίρεση αγκυλίου και συγκολλητικού:

Για να αφαιρέσετε το GoTo™ χρησιμοποιήστε έναν κόφτη συμπίπνων προσδέσεων για να συγκρατήσετε το συγκολλητικό μέσο στο σημείο σύνδεσης αγκυλίου/αδամαντίης και τραβήξτε το αγκύλιο από το δόντι. Το υπόλοιπο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί με την εγγυηφίδα του συστήματος στίλβωσης Renew® και το μπερλό άκρο του συστήματος στίλβωσης Renew®, αριθμός 383.

⚠ **ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΕΙΣ:** Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν δερματική αντίδραση σε ευαίσθη άτομα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε προσεκτικά με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση ακούσιας ενστάλαξης εντός του οφθαλμού, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Επαφή

με άλλους ιστούς: ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με άφθονη ποσότητα νερού για αρκετά λεπτά. Αποφύγετε την εφαρμογή του αδρωποητικού μέσου επάνω στους μαλακούς ιστούς.

⚠ Η χρήση λυχνιών πολυμερισμού UV, αλογόνου και LED μπορεί να επιφέρει οφθαλμική βλάβη. Ο ασθενής, ο ιατρός και ο βοηθός θα πρέπει να φορούν κατάλληλα σχεδιασμένα προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση αυτών των συσκευών φωτοπολυμερισμού.

⚠^{EN} **ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-30°C).

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει τα προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance Orthodontic Products, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιασδήποτε ζημίες ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των προϊόντων όπως περιγράφεται. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετικά με το παρόν.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ: ΗΠΑ Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ή κατόπιν εντολής οδοντίατρου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν στη Reliance και την αρμόδια αρχή της πολιτείας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ES - SPANISH

INDICACIONES DE USO: GoTo® está diseñado para el uso como adhesivo fotopolimerizable para brackets.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación de los dientes: Realice la profilaxis de la superficie del esmalte con 1st & Final®, enjuague y seque bien.

Grabado: Aplique el agente grabador en toda el área que debe cementar. Deje 30 segundos para el grabado. Enjuague y seque bien.

Aplicación del Primer: Aplique una capa de Assure Plus y seque con aire.

Aplicación de la pasta al bracket: Aplique el adhesivo a la base del bracket y extiéndalo en la mala del bracket. Aplique el bracket a la superficie del diente preparado. Fotopolimerice el adhesivo a poca distancia durante 10 segundos*. Nota: GoTo será fluorescente si se expone a luz negra

Descementado del bracket y del adhesivo: Para retirar GoTo™ use un cortador de ligaduras para sujetar el adhesivo en la superficie de contacto del bracket/esmalte y retirar el bracket del diente. Los restos de material pueden retirarse con una fresa del Sistema de Acabado Renew® y con la punta 383 del Sistema de Acabado Renew®.

⚠ **PRECAUCIONES:** Las resinas no polimerizadas pueden provocar sensibilidad cutánea en personas susceptibles. En caso de contacto con la piel, lávese bien con agua y jabón. Si se instila accidentalmente en el ojo, enjuague con abundante agua y obtenga atención médica de inmediato. Contacto con otros tejidos: enjuague el área de derrame inmediatamente con abundante agua durante varios minutos. Evite la colocación de agentes de grabado en los tejidos blandos.

⚠ El uso de luces UV, halógenas y lámparas LED para polimerización puede estar asociado con daño ocular. El paciente, el médico y el asistente deben usar gafas protectoras debidamente diseñadas cuando utilicen estos dispositivos de fotopolimerización.

⚠^{EN} **LIMITES DE LA TEMPERATURE :** À Conserver à température ambiante (15-30 degrés C.)

GARANTIE : Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouvé défectueux. Reliance Orthodontic

Products, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

con ello.

VENTA BAJO RECETA: Las leyes federales de los EE.UU. exigen que la venta de este dispositivo se realice solo a través de un profesional odontológico o por indicación de este.

AVISO: Informe cualquier incidente grave a Reliance y a la autoridad competente del estado en el que se encuentre el usuario y/o el paciente.

FR - FRENCH

INDICATIONS D'UTILISATION: GoTo® est destiné à être utilisé comme adhésif de boîtier photopolymérisable.

MODE D'EMPLOI :

Préparation des dents : Procéder à la prophylaxie des surfaces en émail avec la pierre ponce 1st & Final®, puis rincer et sécher soigneusement.

Mordançage: Appliquer l'agent de mordançage sur toute la surface de liaison. Prévoir 30 secondes pour le mordançage. Rincer et sécher soigneusement.

Application de l'apprêt : Appliquer 1 couche d'Assure Plus et laisser sécher à l'air libre.

Application de la pâte sur le boîtier : Appliquer de l'adhésif sur le tampon du boîtier et le mettre dans la ligature du boîtier. Appliquer le boîtier sur la surface de la dent apprêtée. Photopolymériser immédiatement l'adhésif pendant 10 secondes*. Remarque : GoTo sera fluorescent en présence d'une lumière noire

Retrait des boîtiers et de l'adhésif : Pour retirer le produit GoTo™, utiliser un coupe-ligature pour saisir l'adhésif à l'interface boîtier/email et pincer le boîtier de la dent. Les résidus d'adhésif peuvent être enlevés avec le produit Renew® Finishing System Bur ou Renew® Finishing System #383 Point.

⚠ **PRÉCAUTIONS :** Les résines non polymérisées peuvent provoquer des sensations cutanées chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement à l'eau avec du savon. En cas d'instillation accidentelle dans l'œil, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Contact avec d'autres tissus : rincer immédiatement la zone atteinte abondamment avec de l'eau, pendant plusieurs minutes. Éviter le contact d'agent de mordançage sur les tissus mous.

⚠ L'utilisation de lampes UV, halogènes et LED peut être associée à des lésions oculaires. Le patient, le praticien et l'assistant doivent porter des lunettes de protection spécialement conçues à cet effet lorsqu'ils utilisent ces appareils de photopolymérisation.

⚠^{EN} **LIMITES DE LA TEMPERATURE :** À Conserver à température ambiante (15-30 degrés C.)

GARANTIE : Reliance Orthodontic Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouvé défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits selon les indications. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE : ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

REMARQUE: tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsu qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont installés.

HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU:

Proizvod GoTo® koristi se kao adheziv za bravice pri svjetlosnom učvršćivanju.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Priprema zuba: Profilirajte površinu cakline pomoću sredstva 1st & Final®, isperite i temeljito osušite.

Jetkanje: Nanosite sredstvo za jetkanje na cijelo područje koje se vade. Ostavite 30 sekundi da djeluje. Isperite i temeljito osušite.

Primjena primera: Nanosite 1 sloj proizvoda Assure Plus i osušite zrakom.

Nanošenje paste na bravicu:

Nanosite adheziv na podložak bravice i razmažite ga u mrežu. Postavite bravicu na pripremljenu površinu zuba. Adheziv tretirajte svjetlošću iz blizine 10 sekundi*. Napomena: Proizvod GoTo će imati fluorescentni sjaj pod nevidljivom svjetlošću ultravioletne adheziva i bravice.

Da biste uklonili proizvod GoTo™, koristite ligaturni rezač kako biste obehvatili adheziv na sučetnoj bravice/ cakline i otrgli bravicu sa zuba. Preostali materijal može se ukloniti pomoću brusilice sustava finiranja Renew® i nastavaka br. 38 sustava finiranja Renew®.

↳ **MJERE OPREZA:**

Nepolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako slučajno dospiju u oči, isperite obilnom količinom vode i odmah potražite liječničku pomoć. Kontakt s ostalim tkivima: područje izlijevanja odmah isperite obilnom količinom vode nekoliko minuta. Pazite da sredstvo za jetkanje ne dospije na meko tkivo.

⚠️ Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe ovih uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

⚠️ **OGRANIČENJE**

TEMPERATURE: Čuvati na sobnoj temperaturi (15-30 °C.)

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravan ili pospješdan, koji proizlazi iz upotrebe ili neposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAZI NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

OBAVIJESTI: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili

pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A GoTo® fényre kötő ragasztóként használható fel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fog előkészítése: Polírozza a zománfcfelszíneket a 1st & Final ®-lal, óblítsa le és alaposan szárítsa meg.

Savazás: Vigyen fel savazószert a teljes ragasztandó területre. Hagyja 30 másodpercig marni. Óblítsa le és alaposan szárítsa meg.

Primer alkalmazás: Vigyen fel 1 réteg Assure Plus és szárítsa meg légárammal.

A paszta felvitelle a bracketre: Vigyen fel ragasztót a brackettalpra és osztlassa el a bracketet fémhálóján. Helyezze fel a bracketet a primerrel kezelt fogfelszínre. Fotopolimerizálja a ragasztót közvetlen közelből 10 másodpercig*. Megjegyzés: A GoTo feketefény jelenlétében fluoreszkál.

Bracket és ragasztó eltávolítása:

A GoTo™ eltávolításához egy ligatúra vágót használjon a ragasztó bracket/zománc találkozásánál történő megragadásához, és csipje le a bracketet a fogról. A fennmaradó anyag eltávolítható Renew® Finishing System Bur és Renew ® Finishing System # 383 hegy segítségével.

↳ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személynéknél bőrirritációt okozhatnak. Bőrtrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Véletlen szembe jutás esetén óblítsa ki bő vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Egyéb szövetekkel történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig óblítsa le bőséges mennyiségű vízzel. Kerülje el a savazószert légyszövetekre jutását.

⚠️ Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használatá szemkárosodással járhat. A betegnek, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelelően kialakított védőeseményeket kell viselnie.

⚠️ **HÖMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:**

Szobahőmérsékleten (15-30 fok) tárolandó.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a termékek fentiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésészerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden felelősség és kockázat a felhasználót terhel.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE:

Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvényre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

FELSZÓLÍTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/ vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO GoTo® è utilizzato come adesivo fotopolimerizzabile per bracket.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione dei denti: Eseguire la profilassi delle superfici di smalto con 1st & Final®, risciacquare e asciugare accuratamente.

Mordenzante: Applicare l'agente mordenzante su tutta l'area da incollare. Lasciare trascorrere 30 secondi per la mordenzatura. Risciacquare e asciugare accuratamente.

Applicazione del primer: Applicare 1 strato di Assure Plus e asciugare con aria.

Applicazione della pasta sul bracket: Applicare l'adesivo sulla piastrina del bracket e distribuire nella maglia del bracket. Applicare il bracket sulla superficie del dente pretrattato con primer. Fotopolimerizzare l'adesivo a distanza ravvicinata

per 10 secondi*. Nota: GoTo diventa fluorescente se illuminato dalla lampada a luce nera

Rimozione di bracket e adesivo:

Per rimuovere GoTo™ utilizzare un taglia-legature per afferrare l'adesivo sull'interfaccia bracket/ smalto e separare il bracket dal dente Il materiale rimanente può essere rimosso con una Fresa per Sistema di finitura Renew® e una Punta n. 383 del Sistema di finitura.

↳ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Se accidentalmente instillati negli occhi, lavare abbondantemente con molta acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti. Evitare di collocare l'agente mordenzante sui tessuti molli.

⚠️ L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

⚠️ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15-30 gradi °C.)

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la diffeosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connesse.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: GoTo®

is bedoeld voor gebruik als een licht- uithardingsbeugelijm.

GEBRUIKSAAWIJZING:

Tandvoorbereiding: Reinig de emailoppervlakken met 1st & Final®, spoel af en droog grondig.

Eisen: Breng het etsmiddel aan op het gehele te verlijmen gebied. Wacht 30 seconden voor het etsen. Spoelen en grondig drogen.

Primer aanbrengen: Breng 1 laagje Assure Plus aan en blaas droog.

Aanbrengen van Pasta op beugel: Breng lijm aan op het beugelkussen en smeer het beugelgaas in. Breng de beugel aan op het van primer voorziene tandoppervlak. Lichtuitharden van de lijm op korte afstand gedurende 10 seconden*. Opmerking: GoTo zal fluoresceren onder een blacklight

Beugel en lijmverwijdering:

Om GoTo™ te verwijderen gebruikt u een ligaturnsnijder om de lijm bij de beugel/het raakvlak te grijpen en de beugel van de tand af te knippen. Resterend materiaal kan worden verwijderd met een Renew® Finishing System Bur en Renew® Finishing System #383 Point.

↳ **LET OP:** Ongepolymeriseerde harsen kunnen bij gevoelige personen HUIDIRRITATIE veroorzaken. In geval van contact met de huid grondig wassen met water en zeep. Als het per ongeluk in de ogen komt, spoel dan met een grote hoeveelheid water en zoek onmiddellijk medische hulp. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen. Vermijd plaatsing van etsmiddel op zacht weefsel.

⚠️ Het gebruik van UV-, halogeen- en LED- uithardingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontwerp

veiligheidsbril dragen.

⚠️ **TEMPERATUURBEPERKING:** Opslag bij kamertemperatuur (15-30°C.)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: GoTo® er tiltenkt for bruk som lysgherdende adhesiv for bracketter.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Tannforberedelse: Forbehandle emaljeoverflatene med 1st & Final®, skyl og tørk grundig.

Etsmiddel: Påfør etsmiddel på hele området som skal bondes. La etse i 30 sekunder. Skyl og tørk grundig.

Primer-applikasjon: Påfør 1 strøk Assure Plus, og tørk med luft.

Applikasjon av pasta på bracketten: Påfør adhesiv på bracketputten og smør det inn i bracketnettet. Påfør bracketten på den primede tannoverflaten. Lysghr adhesivet på nært hold i 10 sekunder*. Merk: GoTo fluoresceres under nærvær av svartlys

Fjerne brakett og adhesiv: Fjern GoTo™ ved hjelp av en ligaturkutter, grip adhesivet på grensesnittet mellom bracketten og emaljen og klyp bracketten fra tannen.

Resterende materiale kan fjernes med et Renew® -etterbehandlingssystem med bor og Renew® -etterbehandlingssystem med point nr. 383.
↳ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos mottakelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved utilsikket kontakt med øyne, skyl med store mengder vann og kontakt lege øyeblikkelig. Ved kontakt med annet vev: skyl det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter. Ungå plassering av etsmiddel på bløtvev.

⚠️ Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper kan være forbundet med øyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelampene brukes.

⚠️ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevares ved romtemperatur (15-30 grader C.)

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukerens ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNAD: Rapportert alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: GoTo® jest przeznaczony do stosowania jako światło utwardzalny klej do zamków.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Przygotowanie zębów: Przygotować

powierzchnie szkliva za pomocą pumeksu 1st & Final®, splukać i dokładnie osuszyć.

Wytrawianie: Nałożyć środek wytrawiający na cały obszar, który ma być klejony. Pozostawić na 30 sekund w celu wytrawienia. Splukać i dokładnie osuszyć.

Nakładanie podkładu: Nałożyć 1 warstwę żywicy Assure Plus i osuszyć powietrzem.

Nakładanie pasty na zamek: Nałożyć klej na podkładkę pod zamek i rozprowadzić po stateczce zamka. Na zagruntowaną powierzchnię zęba nałożyć zamek. Klej utwardzać światłem z bliskiej odległości przez 10 sekund*. Uwaga: Klej GoTo w obecności światła czarnego daje efekt fluorescencyjny.

Zdejmnowanie zamka i usuwanie kleju:

Aby usunąć klej GoTo™, użyć kleszczy do cięcia ligatury, w celu uchwytnienia kleju na styku zamka i szklwia i zdjecia zamka z zęba. Pozostały materiał można usunąć za pomocą wiertła Renew® Finishing System Bur i Renew® Finishing System: #383 Point.

↳ **STRÓDKI OSTROŻNOŚCI:** Żyvice niespolimeryzowane mogą wywoływać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą użyć dokładnie wodą z mydłem. W razie przypadkowego dostania się do oczu przepłukać dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukiwać obficie wodą przez kilka minut. Unikać nakładania środka trawiącego na tkankę miękką.

⚠️ Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asystent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.

⚠️ **OGRANICZENIE TEMPERATURY:**

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–30°C).

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: O GoTo® destina-se a ser usado como adesivo de bráquete para fotopolimerização.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação do dente: Faça a profilaxia as superfícies de esmalte com 1st & Final®, enxague e sequae bem.

Condicionamento: Aplique o agente de condicionamento em toda a área e ser colada. Aguarde 30 segundos para o condicionamento. Enxague e sequae bem.

Aplicação do Primer: Aplique 1 camada de AssurePlus e sequae com ar.

Aplicação da Pasta no bráquete: Aplique o adesivo no bloco do bráquete e espalhe na malha do bráquete. Aplique o bráquete sobre a superfície do dente preparada. Faça a fotopolimerização do adesivo nas proximidades durante 10 segundos*. Nota: GoTo irá fluorescer sob a presença de uma luz de fundo

Remoção de bráquetes e adesivos:

Para remover o GoTo™, use um cortador de ligadura para arraar o adesivo na interface bráquete/esmalte e aperte o bráquete do dente.

O material restante pode ser removido com uma Broca do Sistema de Acabamento Renew® e a Ponta do Sistema de Acabamento Renew® #383.

↳ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Se acidentalmente instiladas nos olhos, enxague com quantidade abundante de água e procure imediatamente assistência médica. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

⚠️ O uso de fotopolimerização com UV, halogênicos e LED pode estar associado a lesões oculares. O paciente, o médico e o assistente devem usar óculos de proteção projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de fotopolimerização.

⚠️ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:**

Armazene a temperatura ambiente (15-30 graus C.)

GARANTIA: A RelianceOrthodonticProducts, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A RelianceOrthodonticProducts, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas, diretos ou consequentes, decorrentes do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades nas conexões com eles.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

AVISO: Relate qualquer incidente grave à Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

RO -ROMANIAN

INDICATI DE UTILIZARE: GoTo® este destinat utilizării ca adeziv cu polimerizare pentru bracheti.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

Pregătirea dinților: profilați suprafețele smalțului cu 1st & Final®, clătiți și uscați bine.

Gravarea: aplicați agent de gravare pe întreaga zonă câtă care va fi lipită. Aordați 30 de secunde pentru gravare. Clătiți și uscați bine.

Aplicarea primerului: aplicați un strat de Assure Plus și uscați cu aer.

Aplicarea pastei pe bracket: aplicați adeziv pe suportul bracketului și gresați în plasa bracketului. Aplicați bracketul pe suprafața dintelui. Fotopolimerizați adezivul de la distanță mică pentru 10 secunde*. Notă: GoTo este fluorescent în prezența unei lumini UV

îndepărtarea bracketului și a adezivului: pentru a îndepărta GoTo™, folosiți o freză de ligatură pentru a prelua adezivul din zona de contact dintre bracket și smalț și pentru a disloca bracketul din dinte. Materialul rămas poate fi îndepărtat cu o freză a sistemului de finisare Renew® și cu un punct nr. 383 al sistemului de finisare Renew®.

↳ **PRECAUTII:** rășina nepolimerizată poate provoca sensibilizarea pielii la persoanele susceptibile. În caz de contact cu pielea, splăți-vă bine cu apă și săpun. Dacă produsul este introdus accidental în ochi, splăți cu cantități abundente de apă și solicitați imediat asistență medicală. Contact cu alte țesuturi: clățiți imediat zona cu cantități abundente de apă timp de câteva minute. Evitați plasmarea agentului de gravare pe țesutul moale.

⚠️ Utilizarea luminilor de polimerizare UV, halogen și LED poate fi asociată cu afectarea ochilor. Pacientul, medicul și asistentul trebuie să poarte ochelari de protecție specifici atunci când se utilizează aceste dispozitive de fotopolimerizare.

⚠️ **LIMITE DE TEMPERATURĂ:** a se păstra la temperatura camerei (15-30 grade C.)

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se dovedesc a fi defecte.

Reliance Orthodontic Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele descrise. Înainte de utilizare, este responsabilitatea utilizatorului de a determina compatibilitatea produsului pentru utilizarea prevăzută. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderile în această privință.

NUMAI CU PRESCRIPȚIE PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ: legea federală din SUA restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la recomandarea unui specialist stomatolog.

ÎNSTIȚIARE: Raportați orice incident grav către Reliance și autoritatea competentă din statul în care utilizațiulor și/sau pacientul își are domiciliul.

SV - SWEDISH

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: GoTo ® är avsett att användas som ljushärdande adhesiv för fästen.

BRUKSANVISNING:

Berodning av tand: Polera emaljtorna med 1st & Final ®, skölj och torka noggrant.

Etsning: Applicera etsmedel på hela ytan som ska bondas. Låt verka i 30 sekunder. Skölj och torka noggrant.

Aplicering av primer: Applicera ett lager Assure Plus och torka med luft. Applicering av pasta på fästet: Applicera adhesiv på fästet och arbeta in i nåtbasen. Placera fästet på den primade tandytan. Ljushärda adhesiv på nära avstånd i 10 sekunder*. Obs! GoTo kommer att fluorescera under en blacklight-lampa.

Borttagning av fäste och adhesiv: För att ta bort GoTo™, greppa adhesiv i gränsytan fäste/email med en ligatursax och lossa fästet från tanden. Resterande material kan tas bort med Renew ® Finishing System Bur och Renew ® Finishing System # 383 Point.

↳ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:** Icke-polymeriserade hartser kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. Vid kontakt med huden, tvätta noggrant med tvål och vatten. Vid oavsiktligt stänk i ögon, spola med rikligt med vatten och kontakta omedelbart läkare. Vid kontakt med andra vävnader: skölj omedelbart med stora mängder vatten i flera minuter. Undvik att få etsmedel på mjukvävnad.

⚠️ Användning av UV-, halogen- och LED-härdningsljus kan förknippas med ögonskador. Patienten, tandläkaren och assistenten ska använda korrekt utformade skyddsglasögon vid användning av dessa härdningslampor.

⚠️ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Förvåra vid rumstemperatur (15-30°C.)

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar för att ersätta produkter som visats vara defekta. Reliance Orthodontic Products, Inc. ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster till följd av felaktig eller oaktksam användning. Före användning ansvarar användaren för att fastställa huruvida produkten är lämplig för den avsedda användningen eller inte. Användaren påtar sig all risk och allt ansvar i samband med användning.

ENDAST MOT RECEPT: Enligt federal lagstiftning i USA får denna endast endast säljas av eller på ordination av en tandläkare.

NOTERA: Rapportera alla allvariga incidenter till Reliance och den behöriga myndigheten i den stat där användaren och/eller patienten är etablerad.