


Ortho Technology's version of the Roth and McLaughlin, Bennett & Iviss fix's*
 *Does not imply doctor endorsement.


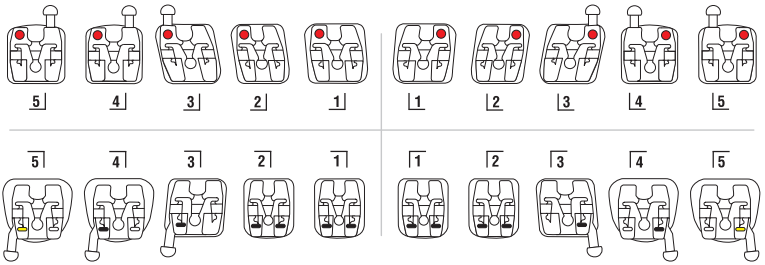


Instructions For Use

Instructions For Use (English)


Opening

1. Simply insert the end of an explorer into the circular opening located just below the archwire slot.
2. Rotate the explorer in a downward 45° motion, gently easing the clip open. Do not pull down on the clip as this will convert the bracket. The clip will "click" once as it disengages from the top lock and "click" a second time when fully opened.

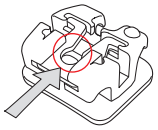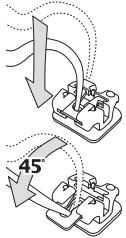


Closing

1. Using a utility plier or tweezers, place one open instrument tip on the top of the bracket and the other open tip at the bottom of the open clip.
2. Gently apply pressure to the plier or tweezers and the clip will begin to move up. The clip will "click" once as it disengages from the bottom lock and "click" a second time when closed.

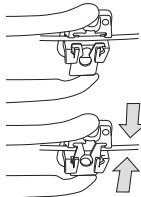

Converting

1. Pull the clip down to remove, when you desire to disengage the clip and convert the bracket.

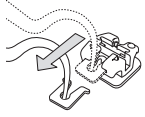

© 2013 Ortho Technology, Inc.
 PC SKU #: L-00247 REV-4



Lotus Plus®
 Passive Self-Ligating
 Bracket System



Instruction pour l'utilisation du Lotus Plus [French]

1. Insérez simplement l'extrémité d'un explorateur dans l'ouverture circulaire située juste au-dessous de la fente de l'arc dentaire.
2. Faites pivoter l'explorateur vers le bas à 45°, en ouvrant le clip en douceur. Ne tirez pas sur le clip vers le bas car cela transformera le boîtier orthodontique. Le clip « cliquera » une fois lorsqu'il se désengage du verrou supérieur et « cliquera » une deuxième fois lorsqu'il sera complètement ouvert.

Ouverture

Para abrir

1. Inserte el extremo de un explorador en la abertura circular situada inmediatamente debajo de la ranura del alambre del arco.
2. Haga girar el explorador en un movimiento descendente de 45°, abriendo suavemente el clip. No tire hacia abajo del clip pues esto convertirá el soporte. El clip emitirá un "chasquido" cuando se desengancha del retén superior y volverá a emitir un segundo "chasquido" cuando se abra por completo.

Para cerrar

1. Usando alicates o tenacillas, coloque una punta del instrumento abierto en la parte superior del soporte y luego la otra punta abierta en la parte inferior del clip.
2. Aplique presión suavemente a los alicates o a las tenacillas y el clip comenzará a moverse hacia arriba. El clip emitirá un "chasquido" cuando se desengancha del retén inferior y volverá a emitir un segundo "chasquido" cuando se cierra.

Transformation

1. Tirez le clip vers le bas pour le retirer, lorsque vous souhaitez dégrager le clip et transformer le boîtier orthodontique.

Lotus Plus Istruzioni per l'uso [Italian]

Apertura

1. Inserire semplicemente la punta di uno specchio nell'apertura circolare che si trova inferiormente allo sito dell'arco.
2. Ruotare lo specchio verso il basso di 45 gradi; favorendo gentilmente l'apertura della clip. Non tirare la clip verso il basso, poiché tale manovra converte il braket. La clip fa uno scatto quando si disinnesca dalla chiusura superiore e fa un secondo scatto quando si apre completamente.

Chiusura

1. Con una pinza ortodontica o una pinzetta da medicazione, collocare un'estremità dello strumento aperto sulla sommità del braket e l'altra estremità aperta nella parte inferiore della clip aperta.
2. Applicare una delicata pressione sulla pinza ortodontica o da medicazione la clip inizierà a spostarsi verso l'alto. La clip fa uno scatto quando si disinnesca dalla chiusura inferiore e fa un secondo scatto quando si chiude.

Conversione

1. Per rimuovere la clip, tirarla verso il basso quando si desidera disinnescarla e convertire il braket.

Apertura

1. Legen Sie einfach das Ende eines Explorers in die runde Öffnung, die sich direkt unter dem Bogenbracketschlitz befindet.
2. Drehen Sie den Explorer 45° nach unten, um die Klammer vorsichtig öffnen. Ziehen Sie diese nicht nach unten, da sich dadurch das Bracket verformen kann. Die Klammer „klickt“ einmal, wenn sie sich vom oberen Verschluss löst, und noch einmal, wenn sie ganz geöffnet ist.

Schließen

1. Legen Sie eine geöffnete Instrumentenspitze mit einer Zange oder Pinzette oben an das Bracket an und die Zange unten auf die geöffnete Klammer.
2. Mit sanftem Druck auf die Zange oder Pinzette beginnt die Klammer, sich nach oben zu bewegen. Sie „klickt“ einmal, wenn sie sich vom unteren Verschluss löst, und noch einmal, wenn sie geschlossen ist.

Umformen

1. Ziehen Sie die Klammer nach unten, um sie zu entfernen, wenn Sie diese lösen und das Bracket umformen möchten.

Instrucciones para el uso de Lotus Plus [Spanish]

1. Inserte el extremo de un explorador en la abertura circular situada inmediatamente debajo de la ranura
2. Haga girar el explorador en un movimiento descendente de 45°, abriendo suavemente el clip. No tire hacia abajo del clip pues esto convertirá el soporte. El clip emitirá un "chasquido" cuando se desengancha del retén superior y volverá a emitir un segundo "chasquido" cuando se abra por completo.

Para cerrar

1. Usando alicates o tenacillas, coloque una punta del instrumento abierto en la parte superior del soporte y luego la otra punta abierta en la parte inferior del clip.
2. Aplique presión suavemente a los alicates o a las tenacillas y el clip comenzará a moverse hacia arriba. El clip emitirá un "chasquido" cuando se desengancha del retén inferior y volverá a emitir un segundo "chasquido" cuando se cierra.

Conversion

1. Tire del clip hacia abajo para quitar, cuando quiera desenganchar el clip y convertir el soporte.

Lotus Plus Gebrauchsanweisung [German]

Öffnen

1. Legen Sie einfach das Ende eines Explorers in die runde Öffnung, die sich direkt unter dem Bogenbracketschlitz befindet.
2. Drehen Sie den Explorer 45° nach unten, um die Klammer vorsichtig öffnen. Ziehen Sie diese nicht nach unten, da sich dadurch das Bracket verformen kann. Die Klammer „klickt“ einmal, wenn sie sich vom oberen Verschluss löst, und noch einmal, wenn sie ganz geöffnet ist.

Chiusura

1. Con una pinza ortodontica o una pinzetta da medicazione, collocare un'estremità dello strumento aperto sulla sommità del braket e l'altra estremità aperta nella parte inferiore della clip aperta.
2. Applicare una delicata pressione sulla pinza ortodontica o da medicazione la clip inizierà a spostarsi verso l'alto. La clip fa uno scatto quando si disinnesca dalla chiusura inferiore e fa un secondo scatto quando si chiude.

Conversione

1. Per rimuovere la clip, tirarla verso il basso quando si desidera disinnescarla e convertire il braket.